

ZDE
ZAJIŠŤUJEME

samoodběrné

PCR
TESTY

COVID-19



Sada kloktej.to
pro snadný samo-odběr

kloktej.to

 **Magistra**
Lékárny

kloktej.to

Magistra
Lékárny

Sada kloktej.to pro snadný samo-odběr

Testy PCR z pohodlí domova



Jak to funguje?

- 1 V lékárně zakoupím KLOKTEL.TO
- 2 Doma on-line vyplním žádanku a aplikuji dle návodu odběrovou sadu
- 3 Předám v lékárně ke zpracování (lékárna načte čárový kód, mě přijde na e-mail notifikace), lékárna předá můj vzorek svozové firmě k transportu do laboratoře
- 4 Já mohu vzorek trasovat (podívat se, kde se můj vzorek aktuálně nachází) www.kloktej.to/kde-je-muj-vzorek.html
- 5 Vzorek přijede do laboratoře, laboratoř potvrdí převzetí vzorku a žádanky - obdržím notifikační sms a e-mail
- 6 Laboratoř vyhodnotí vzorek, obdržím certifikát NA E-MAIL!
- 7 POS+ V případě pozitivního nálezů SARS-CoV-2 doporučujeme kontaktovat Vašeho registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, u kterého jste zaregistrovaní/a.
- 8 Certifikát lze rovněž stáhnout na odco.uzs.cz nebo pomocí aplikace TČKA ve Vašem chytrém telefonu
- 9 Mám certifikát, mohu se jím prokázat

kloktej.to

Magistra
Lékárny

POSTUP SAMOODBĚRU
Při samotném odběru dodržujte přesné instrukce uvedené níže

! Nutno objednat a uhradit laboratorní analýzu vzorku na WWW.KLOKTEL.TO, pokud nebyla zakoupena spolu s odběrovou sadou nebo pokud nebude hrazeno Vaší zdravotní pojišťovnou.

Odběr vzorku proveďte v těchto dnech: PO, ÚT, ST, ČT

Odběr proveďte ve více uvedených dnech nejlépe ráno ještě před tím, než vykonáte hygienu dlaní, ústní. Před provedením samoodběru si dobře umyjte ruce. Odebraný vzorek uchovávejte při teplotě 4–37 °C a odevzdejte DO TŘÍ HODIN na nejbližší sběrné místo. Lékárny a sběrná místa přijímají krabičky se vzorky jen v pondělí, úterý, středu a čtvrtek! Nevystavujte mrazii!

1 Před provedením testu vyplňte elektronickou žádanku na www.kloktej.to a pokud Vás systém vyvine k úhradě zvoleného testu, proveďte úhradu.

2 Pro elektronické vyplnění žádanky můžete vyjimečně využít i službu našeho HOT LINE telefonu. Samolepicí štítek s čárovým kódem označte svým jménem a rodným číslem a nalepte na zkumavku.

3 Do přiřazené odměrky napustěte vodu přesně po rysku 5 ml.

4 Nadechněte se zhluboka a zakleštěte. Zvyšší tím pravděpodobnost zachytu infekce z dlaních dýchacích cest.

5 Do úst vlije obsah odměrky, ten nepolykejte! Pokud omylem polknete, postup opakujte od bodu 3.



6 Kloktejte 20 až 30 vteřin. Můžete i přerušované, dodržte min. celkovou doporučenou dobu klokčení.



7 Vykládky obsah úst vypiňte zpět do odměrky.



8 Vykládky obsah odměrky opatrně přelijte do přiřazené zkumavky, avšak nesmíte vyspat stabilizační prasek uvnitř zkumavky. Stabilizační prasek uvnitř zkumavky není zdravotně nebezpečný.



9 Pečlivě zkumavku uzavřete a protřepejte.




10 Popsanou a uzavřenou zkumavku vložte do sáčku společně s absorpční vložkou, který následně uzavřete.



11 Takto zabalenou absorpční vložku a zkumavku vložte do dalšího sáčku a uzavřete.



12 Zkumavku v uzavřeném vnějším sáčku vložte do nepoškozené krabičky. Krabičku uzavřete a shora přelepte bezpečnostní nálepku. Krabičku předejte k vyhodnocení.

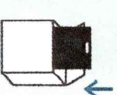

13 **Vyhleďte si nejbližší sběrné místo na KLOKTEL.TO nebo se zeptejte v lékárně, kde jste testovací sadu zakoupili.**

Samoodběrová sada obsahuje: transportní plastovou zkumavku, jednorázovou odměrku na vodu, postup samoodběru, samolepky s čárovými kódy, velký a malý plastový sáček, přepravní krabičku, absorpční vložku, bezpečnostní nálepku pro sběr odebraného vzorku

